

Chirurgie bucco-maxillaire - Parodontologie - Implantologie

Catalogue
Produits

MJK

Instruments

www.mjkinstruments.com

BW001



BW002



BW003



BW004



Applications

- Incisions proximales (mésiales et distales) et dans les espaces inter-dentaires
- Incisions papillaires
- Incisions palatines (lambeaux et prélèvements de greffons conjonctifs)
- Incisions pour chirurgies délicates muco-gingivales
- Incisions crestales (en implantologie)
- Incisions sulculaires en zones vestibulaires ou linguales
- Incisions verticales dans les secteurs antérieurs (supérieurs ou inférieurs)
- Incisions sulculaires, papillaires en zones étroites ou rendues difficiles d'accès aux lames 15 et 15 C



BH001



BH002



BH004



Applications

- Incisions proximales (mésiales et distales) et dans les espaces inter-dentaires
- Incisions papillaires
- Incisions palatines (lambeaux et prélèvements de greffons conjonctifs)
- Incisions pour chirurgies délicates muco-gingivales
- Incisions crestales (en implantologie)
- Incisions sulculaires en zones vestibulaires ou linguales
- Incisions verticales dans les secteurs antérieurs (supérieurs ou inférieurs)
- Incisions sulculaires, papillaires en zones étroites ou rendues difficiles d'accès aux lames 15 et 15 C

Caractéristiques techniques des lames


- Lames en acier suédois haute performance Sandvik Bioline®
- Usage unique (stérilisation OE)
- Affûtage double biseau de type A.A.S.
- Conditionnement à l'unité en sachet plastique transparent
- Emballage : boîte de 10 lames (BW – SB)
boîte de 5 bistouris (BH)
- Conformité avec la directive CE 93/42





Caractéristiques techniques

- Porte-lames inox (IH001 et IH002) ou alliage de titane (IH001T et IH002T)
- Diamètre de prise en main : 6 mm (IH001/1T) / 8 mm (IH002/2T)
- Longueur 11 cm (IH001/1T) et 14 cm (IH002/2T)
- Moletage de prise en main
- Molette de serrage sécurisée
- Conditionnement à l'unité
- Notice d'utilisation
- Non stérile

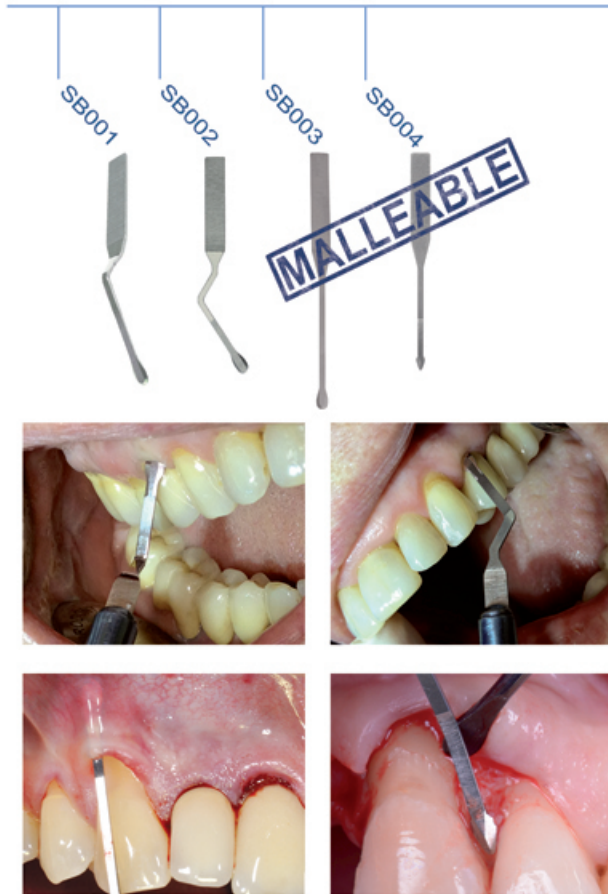

TUNNELISATION

Applications

- Incisions intrasulculaires
- Tunnelisation
- Intervention par enveloppe
- Chirurgie de lambeaux déplacés apicalement ou latéralement
- Greffes double-papilles
- Desépithélialisation (SB004)

AFFÛTAGE A.A.S. (All Around Sharpened)

Les bistouris MJK Instruments bénéficient en exclusivité de l'affûtage A.A.S. (affûtage contourné et continu) qui permet d'inciser sans accroc en traction comme en poussée

Associé à la forme des lames MJK Instruments, l'affûtage A.A.S., certainement l'un des plus fin au monde, autorise des actes très ciblés, et dans la plupart des cas, un seul trait d'incision.


Avantages :

- Confort du chirurgien
- Réduction des traumatismes
- Meilleure coaptation des tissus



1,2 mm

La série d'écarteurs modelables « *Surgy' Soft* » **MJK Instruments**, de formes et angulations spécifiquement étudiées, répond à toutes les situations d'intervention en chirurgie bucco-maxillaire, parodontale et implantaire

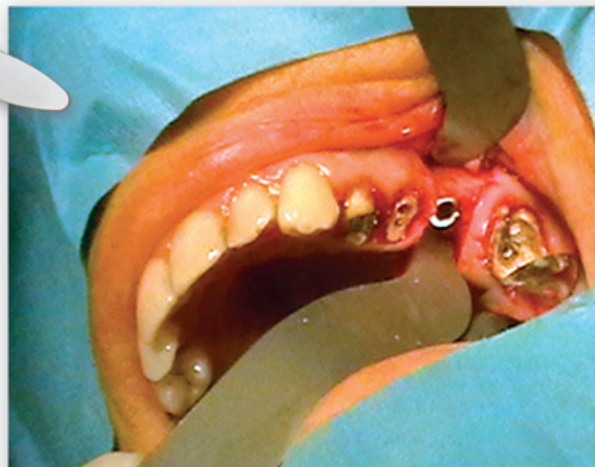

Une chirurgie à livre ouvert

Applications :

Ecarteur n°1 : s'adresse plus particulièrement aux interventions dans les secteurs vestibulaires antérieurs.

Ecarteurs n° 2 et 3 : sont plus indiqués pour les secteurs canines et prémolaires, en vestibulaire et en lingual (ou palatin).

Ecarteurs n° 4 et 5 : destinés plus précisément aux secteurs molaires, en vestibulaires en lingual et en palatin, mais également dans les secteurs antérieurs, en lingual (ou en palatin).

De manière générale :

Les angles les plus fermés s'adressent aux zones les moins accessibles.

Personnalisation :

L'adaptation par modelage du corps (à l'aide de la clé KE001) offre pour chaque instrument une infinité de possibilités d'accès à toute la cavité buccale.



KE001



"*Surgy' Soft*" est la seule série d'écarteurs de chirurgie buccale entièrement personnalisable.

LA TROISIEME MAIN DU CHIRURGIEN...

Applications


Conçues pour la chirurgie osseuse, les pinces MJK Instruments assurent un maintien ferme et stable du greffon en position, et libèrent ainsi la main du chirurgien pour une intervention confortable et sécurisée (le forage peut se faire aisément et directement sur le site)

Crémaillère allongée pour une ouverture plus importante.

Mors asymétriques autorisant le libre accès pour les opérations de forage et de vissage.

Les extrémités «cuillère» (côté palatin) et «boule» (côté greffon) finement moletées, assurent une accroche parfaite sur la surface osseuse.

Greffon osseux

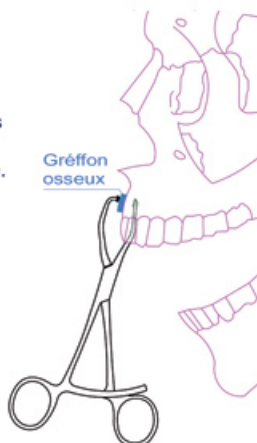

CL011
Mors droits



CL021
Mors asymétriques
côté droit



CL022
Mors asymétriques
côté gauche

SIMPLE... MAIS TRES EFFICACE !

Applications

- L'applicateur MJK Instruments évite au chirurgien de tenir le greffon avec son doigt ou un autre instrument inadapté.
- L'extrémité "boule", finement moletée, offre une accroche parfaite sur la surface osseuse et permet de maintenir le greffon en situation.
- Lors de l'intervention, l'instrument peut basculer à gauche ou à droite tout en restant en contact permanent avec le greffon afin de le maintenir en pression.

Tête moletée



AP001



(modèle fantôme)



"Concevoir et commercialiser des instruments de Chirurgie innovants et adaptés, ingénieux et simples"

C'est ainsi que les fondateurs de MJK Instruments ont décidé de définir leur activité.

Innovants... Pour nous différencier

Adaptés... Pour répondre au mieux aux exigences de notre clientèle

Ingénieux... Parce que c'est notre légitimité dans un marché dominé par des groupes aux moyens considérables.

Et simples... Parce que les idées les plus simples sont toujours les meilleures.

Avec, comme préoccupation permanente, l'exigence de la qualité et de



De sa conception à sa mise sur le marché, un produit MJK Instruments est toujours le fruit d'une étroite collaboration avec les chirurgiens les plus reconnus.

Notre volonté est de répondre aux exigences de nos utilisateurs, en offrant une gamme d'instruments ingénieux, et qui facilitent la pratique d'actes chirurgicaux sur des sites difficiles d'accès.

MJK Instruments s'est plus particulièrement positionnée sur la chirurgie dentaire et maxillo-faciale.

Les produits MJK Instruments font l'objet des démarches légales nécessaires à l'obtention du marquage CE.

Toutes les dispositions sont également prises en matière de

Installée depuis octobre 2007 sur le site du technopôle de Château Gombert, MJK Instruments a déménagé ses bureaux en Janvier 2015 afin de tripler sa surface de stockage et répondre ainsi à la demande croissante de sa clientèle.

La ville de Marseille, contrairement à certains clichés, offre un environnement particulièrement propice à l'épanouissement de ses entreprises.

Si elle est avant tout un choix du cœur, notre situation géographique résulte également d'une option stratégique.





VOTRE DISTRIBUTEUR :



MJK Instruments

159, Chemin de Sainte Marthe

13014 Marseille

France

Tel. : +33 (0) 491 537 260

Mob. : +33 (0) 608 699 771

Fax : +33 (0) 491 537 260

contact@mjk instruments.com - www.mjk instruments.com

